



**Antibacterial
Medical Honey™**
**Antibakterieller
Medizinischer Honig™**




Medihoney Pty Ltd
399 Archerfield Rd
RICHLANDS QLD 4077
AUSTRALIA
☎ Toll Free: 1800 006 334
☎ Int Tel: +61 7 3712 8280



Medihoney (Europe) Ltd
200 Brook Drive, Green Park
Reading RG2 6UB UK
☎ UK Toll Free: 0800 071 3912
☎ Int Tel: +44 (0) 118 949 7541

www.medihoney.com

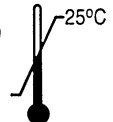

STERILE R

109142V1



Medihoney™ Antibakterieller Honig besteht aus einer exklusiven Mischung von verschiedenen Honigsorten, hauptsächlich *Leptospermum* sp., die wegen ihrer einzigartigen wundreinigenden Wirkung und antibakteriellen Schutzeigenschaften ausgewählt wurden.

Medihoney™ Antibakterieller Medizinischer Honig™ ist eine topische Zubereitung, die 100% Medihoney™ Antibakterieller Honig enthält und sowohl für die chronische als auch die akute Wundpflege verwendet werden kann. Für die folgenden Bereiche wurde die klinische Wirksamkeit nachgewiesen:

- bewirkt eine für die Heilung wichtige feuchte Wundumgebung
- schützt die Wunde, in dem er eine Barriere gegen pathogene Wundkeime, einschließlich gegen Antibiotika resistente Stämme, bildet
- trägt zu einem saubereren Wundgrund bei
- beseitigt rasch den Geruch übelriechender Wunden
- reduziert das Risiko einer bakteriellen Besiedlung

Medihoney™ Antibakterieller Medizinischer Honig™ ist ein nichthaftendes, natürliches Wundversorgungsmittel und vermindert deshalb Traumatisierung und Schmerzen beim Verbandswechsel.

Indikationen

Medihoney™ Antibakterieller Medizinischer Honig™ kann rezeptfrei verwendet werden bei:

- oberflächlichen Wunden wie Schnitte, Kratzer, Schürfwunden
- oberflächlichen Verbrennungen

Unter ärztlicher Aufsicht kann Medihoney™ Antibakterieller Medizinischer Honig™ verwendet werden bei der Versorgung von:

- tiefen Wunden
- Wunden mit Fisteltaschen
- nekrotischen Wunden
- Wunden mit Gewebdemarkierung / belegten Wunden
- infizierten Wunden
- chirurgischen Wunden
- übelriechenden Wunden

Hinweise zur Anwendung

1. Wundrand mit Schutzcreme abdecken
2. Medihoney™ Antibakterieller Medizinischer Honig™ kann direkt auf den Wundgrund aufgetragen werden. Vermeiden Sie direkten Kontakt von Tubenöffnung und Wunde.
3. Verbandsmaterial kann zur Versorgung tiefer Wundhöhlen mit Medihoney™ Antibakteriellem Medizinischen Honig™ getränkt werden.
4. Es ist darauf zu achten, dass Medihoney™ Antibakterieller Medizinischer Honig™ in vollständigem Kontakt mit dem Wundgrund ist – ca. 3mm Schichtdicke. Falls Wundsekret vorhanden ist, mehr auftragen.
5. Ein nichthaftender Verband sollte zur Abdeckung von Medihoney™ Antibakteriellem Medizinischem Honig™ verwendet werden.
6. Bei stark nässenden Wunden kann eine zweite Wundauflage verwendet werden. Diese sollte saugfähig genug sein, um die Wundsekretmenge zu halten.
7. Medihoney™ Antibakterieller Medizinischer Honig™ kann abhängig vom vorhandenen Wundsekret bis zu 7 Tagen auf der Wunde belassen werden. Die Wundauflage sollte gewechselt werden, wenn sie mit Wundsekret gesättigt ist, bzw. wenn die abdeckende Auflage Wundsekret durchlässt.

Kontraindikationen

- Nicht bei Patienten mit Allergien gegen Bienenprodukte verwenden.

Beobachtungen

- Bei der Verwendung von Medihoney™ Antibakteriellem Medizinischem Honig™ kann die Wunde zunächst größer und tiefer erscheinen, da sie von unnötigem Gewebe gereinigt wird. Diese Zunahme sollte von einem verbesserten Aussehen der Wunde begleitet werden.
- Bei tiefen Wunden kann Mull zur Tamponade mit Medihoney™ Antibakterieller Medizinischer Honig™ vor Einbringen in die Wunde getränkt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Sollten Nebenwirkungen außer einem kurz anhaltenden Brennen auftreten, ist der Verband zu entfernen und der betroffene Bereich auszuspülen.
- Tiefe, fistelnde, nekrotische, diabetische, Wunden mit Gewebdemarkierung / belegte Wunden, übelriechende oder chirurgische Wunden sollten unter ärztlicher Aufsicht behandelt werden.
- Medihoney™ Antibakterieller Medizinischer Honig™ kann unter ärztlicher Aufsicht und häufiger Wundinspektion bei infizierten Wunden verwendet werden.
- Für Wunden mit reichlichem Wundsekret wird eine zweite, hochsaugfähige Wundauflage empfohlen. Nicht für stark nässende Wunden geeignet.
- Nicht für Körperhöhlen geeignet.
- Falls keine oder nur sehr langsame Wundheilung einsetzt, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Die Sterilität des Produktes besteht nur solange die Versiegelung unversehrt ist. Beschädigte Tuben bitte nicht verwenden.



Medihoney™ Antibacterial Honey is an exclusive blend of honeys, predominantly *Leptospermum* sp., selected for their unique wound cleaning and antibacterial barrier properties.

Medihoney™ Antibacterial Medical Honey™ is a topical preparation which contains 100% Medihoney™ Antibacterial Honey and can be used for both chronic and acute wound care. It is proven to be clinically effective for:

- providing a moist wound healing environment
- protecting the wound by creating a barrier against wound pathogens including antibiotic resistant strains
- Assisting in achieving a cleaner wound bed
- Rapidly removing malodour
- Reducing the risk of infection from bacteria

Medihoney™ Antibacterial Medical Honey™ is a non-adherent natural dressing and therefore reduces trauma and pain at dressing changes.

Indications

For over-the-counter use, Medihoney™ Antibacterial Medical Honey™ can be used for:

- Superficial wounds such as cuts, scratches, abrasions
- Superficial burns

Under the supervision of a health care professional, Medihoney™ Antibacterial Medical Honey™ can be used for the management of:

- Deep wounds
- Sinus wounds
- Necrotic wounds
- Sloughy wounds
- Infected wounds
- Surgical wounds
- Malodorous wounds

Directions for use

1. Protect wound edges with a barrier cream
2. Medihoney™ Antibacterial Medical Honey™ can be directly applied to the base of the wound. Avoid direct contact between the wound and the nozzle of the tube.
3. Medihoney™ Antibacterial Medical Honey™ can be soaked into a dressing for deep wound cavities.
4. Ensure that Medihoney™ Antibacterial Medical Honey™ is in full contact with the base of the wound – approximately 3mm thickness (1/4 inch). Apply more if wound fluid is present.
5. A non-adherent gauze dressing should be applied to cover the Medihoney™ Antibacterial Medical Honey™
6. A second dressing can be applied if there is a lot of wound fluid. It should be sufficiently absorbent to retain the volume of wound fluid.
7. Medihoney™ Antibacterial Medical Honey™ can be left on the wound for up to 7 days dependent on the amount of fluid present. The dressing should be changed when it is saturated with wound fluid or if the cover dressing is leaking.

Contraindications

- Do not use on individuals who have had an allergic reaction to bee products.

Observations

- When using Medihoney™ Antibacterial Medical Honey™, the wound may initially appear larger in size and depth as unnecessary tissue is cleaned away. This increase should be accompanied by an improved appearance of the wound.
- In deep wounds, packing gauze can be saturated with Medihoney™ Antibacterial Medical Honey™ prior to being introduced into the wound.

Precautions

- For any experience of a reaction other than a short lasting stinging sensation, remove the dressing and wash the affected area.
- For deep, sinus, necrotic, diabetic, sloughy, malodorous or surgical wounds, treatment should be under the supervision of a health care professional.
- Medihoney™ Antibacterial Medical Honey™ may be used on infected wounds under clinical supervision with frequent monitoring of the wound.
- For wounds releasing a high level of fluids, a second dressing of high absorbency is recommended. Not recommended for use on heavily exudating wounds.
- Not recommended for use in body cavities.
- In the event of a slow or non-responding wound please seek medical advice.

Product is only sterile until seal is broken. Do not use if tube is damaged.