


blink® intensive

TOP FRONT

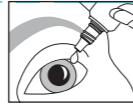

beruhigende Augentropfen/gouttes ophtalmiques lubrifiantes
10ml

DE Langanhaltende Linderung bei Trockenheitsgefühl am Auge und müden Augen

Moderne, feuchtigkeitsspendende Augentropfen mit spezieller Formulierung zur Beruhigung bei trockenen, gereizten oder angestregten Augen.

Indikationen

Für gereizte, müde Augen. Zur Anwendung mit Kontaktlinsen geeignet.

Kontraindikationen

Keine Kontraindikationen bekannt.

Anwendung

- Nach Bedarf 1 bis 2 Tropfen in das betroffene Auge geben
- Mehrmals blinzeln, um das Auge zu spülen
- So oft wie nötig anwenden
- Kontaktlinsen müssen nicht herausgenommen werden

Vorsichtsmaßnahmen

- Nicht verwenden, wenn das Sicherheitssiegel gebrochen ist oder fehlt
- Die Lösung nicht schlucken
- Bei Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe nicht anwenden
- Um Kontamination zu vermeiden, die Behälterspitze an keiner Stelle berühren und nicht direkt das Auge berühren
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Bei 5°C bis 25°C aufbewahren
- 45 Tage nach Anbruch der Packung restliche Lösung entsorgen
- Mögliche Risiken, Nebenwirkungen oder Komplikationen, die grundsätzlich beim Gebrauch von Augentropfen auftreten können: allergische Reaktionen, Entzündungen oder Infektionen

Bei anhaltenden Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Augenarzt.

Nebenwirkungen

Keine Nebenwirkungen bekannt.

Enthält:

Polyethylenglykol 400 (PEG 400) – 0,25%
OcuPure® Konservierungsmittel (Natriumchlorid)
Natriumhyaluronat – 0,20%
Borsäure
Natriumborat (Decahydrat)
Natriumchlorid
Kaliumchlorid
Kalziumchlorid (Dihydrat)
Magnesiumchlorid
Gereinigtes Wasser

Symbole • Symboles

Gebrauchsanweisung beachten Consulter le mode d'emploi	Hersteller Fabricant	Temperaturbegrenzung Limites de température
Steril. Aseptische Technik Stérile. Technique aseptique	Chargen-Bez. Numéro de lot	5°C
Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	Verwendbar bis Date limite d'utilisation	45 Tage nach Anbruch der Packung restliche Lösung entsorgen Jeter toute solution restante 45 jours après l'ouverture initiale du flacon


CE 0123

STERILE A

AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co Dublin, Ireland
blink and OcuPure are trademarks of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2018

blink® intensive

TOP BACK

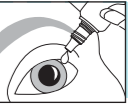

gocce oculari lubrificanti/verzachtende oogdruppels
10ml

IT Sollievo duraturo da secchezza e stanchezza oculare

Gocce oculari lubrificanti formulate per fornire protezione e comfort da secchezza, irritazione o fastidio oculare.

Indicazioni

Sensazione di fastidio e irritazione oculare. Può essere usato con lenti a contatto.

Controindicazioni

Nessuna controindicazione nota.

Istruzioni per l'uso

- Instillare 1 o 2 gocce nell'occhio interessato secondo necessità
- Battere le palpebre alcune volte per lubrificare l'occhio
- Usare il prodotto con la frequenza necessaria
- Se si indossano lenti a contatto, non è necessario rimuoverle

Precauzioni

- Non utilizzare il prodotto se il sigillo antimanomissione è danneggiato o assente
- Non ingerire la soluzione
- Non utilizzare in caso di allergia ad uno qualsiasi degli ingredienti
- Per evitare la contaminazione, non lasciare che il beccuccio del flacone venga a contatto con alcuna superficie ed evitare il contatto con gli occhi
- Non utilizzare dopo la data di scadenza
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Conservare a temperatura compresa tra 5 °C e 25 °C
- Eliminare tutta l'eventuale soluzione rimasta 45 giorni dopo la prima apertura del flacone
- I possibili rischi, effetti indesiderati o complicanze generalmente associati all'uso delle gocce oculari sono: reazioni allergiche, reazioni infiammatorie o infezioni

Se i problemi persistono, rivolgersi al proprio oculista.

Effetti indesiderati

Nessun effetto indesiderato noto.

Contiene:

Poliethylenglycol 400 (PEG 400) – 0,25%
OcuPure® conservante (clorito di sodio)
Ialuronato di sodio – 0,20%
Acido bórico
Borato di sodio (decaidrato)
Cloruro di sodio
Cloruro di potassio
Cloruro di calcio (diidrato)
Cloruro di magnesio
Acqua purificata

Simboli • Symbolen

Leggere le istruzioni per l'uso Raadpleeg de gebruiksaanwijzing	Fabbricante Fabrikant	Limiti di temperatura Temperatuurbeparking
Sterile. Tecnica aseptica Steriel. Aseptische techniek	Lotto Lotnummer	5°C
Non utilizzare se la confezione è danneggiata Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is	Scadenza Uiterste gebruiksdatum	Eliminare tutta l'eventuale soluzione rimasta 45 giorni dopo la prima apertura del flacone Resterende vloeistof 45 dagen nadat u de fles voor het eerst geopend hebt, weggoien

AM70243GM13D

Revision Date: 04/2018

XXXXXX XX