


# blink® intensive

beruhigende Augentropfen  
gocce oculari lubrificanti  
20 x 0.4ml

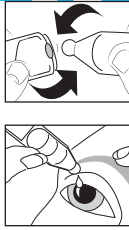

## DE Langanhaltende Linderung bei Trockenheitsgefühl am Auge und müden Augen

Moderne, feuchtigkeitsspendende Augentropfen mit spezieller Formulierung zur Beruhigung bei trockenen, gereizten oder angestrengten Augen.

### Indikationen

Für gereizte, müde Augen. Zur Anwendung bei Kontaktlinsen geeignet.

### Kontraindikationen

Keine Kontraindikationen bekannt.

### Anwendung

- Nach Bedarf 1 bis 2 Tropfen in das betroffene Auge geben
- Mehrmals blinzeln, um das Auge zu spülen
- So oft wie nötig anwenden
- Kontaktlinsen müssen nicht herausgenommen werden

### Vorsichtsmaßnahmen

- Immer nur frische Lösung anwenden
- Bei beschädigtem Dosierbehälter nicht verwenden
- Die Lösung nicht schlucken
- Bei Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe nicht anwenden
- Um Kontamination zu vermeiden, die Behälterspitze an keiner Stelle berühren und nicht direkt das Auge berühren
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Bei 5 °C bis 25 °C lagern
- Nach Verwendung Behälter und restliche Lösung unverzüglich entsorgen
- Mögliche Risiken, Nebenwirkungen oder Komplikationen, die grundsätzlich beim Gebrauch von Augentropfen auftreten können: Allergische Reaktionen, Entzündungen oder Infektionen

Bei anhaltenden Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Augenspezialisten.

### Nebenwirkungen

Keine Nebenwirkungen bekannt.

### Enthält:

Polyethylenglykol 400 (PEG 400) – 0,25 %  
Natriumhyaluronat – 0,20 %  
Borsäure  
Natriumborat (Decahydrat)  
Natriumchlorid  
Kaliumchlorid  
Kalziumchlorid (Dihydrat)  
Magnesiumchlorid  
Gereinigtes Wasser

## IT Sollievo duraturo da secchezza e stanchezza oculare

Gocce oculari lubrificanti espressamente formulate per fornire protezione e confort da secchezza, irritazione o fastidio oculare.

### Indicazioni

Sensazione di fastidio ed irritazione oculare. Può essere usato con lenti a contatto.

### Controindicazioni

Nessuna controindicazione nota.

### Istruzioni per l'uso

- Instillare 1 o 2 gocce nell'occhio interessato secondo necessità
- Battere le palpebre alcune volte per lubrificare l'occhio
- Usare il prodotto con la frequenza necessaria
- Se si indossano lenti a contatto, non è necessario rimuoverle

### Precauzioni

- Utilizzare sempre soluzione fresca
- Non utilizzare il prodotto se il contenitore della dose unitaria è danneggiato
- Non ingerire la soluzione
- Non utilizzare in caso di allergia ad uno qualsiasi degli ingredienti
- Per evitare contaminazioni, non toccare con l'estremità del contagocce alcuna superficie ed evitare il contatto con l'occhio.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Conservare a una temperatura compresa tra 5 °C e 25 °C
- Eliminare il contenitore ed eventuale soluzione rimanente immediatamente dopo l'uso
- I possibili rischi, effetti indesiderati o complicanze generalmente associati all'uso delle gocce oculari sono: reazioni allergiche, reazioni infiammatorie o infezioni

Se i problemi persistono, rivolgersi al proprio specialista di fiducia.

### Effetti indesiderati

Nessun effetto indesiderato noto.

### Contiene:

Polietilenglicole 400 (PEG 400) – 0,25 %  
Ialuronato di sodio – 0,20 %  
Acido bórico  
Sodio borato (decaidrato)  
Cloruro di sodio  
Cloruro di potassio  
Cloruro di calcio (dihidrato)  
Cloruro di magnesio  
Acqua purificata

## Symbole • Simboli


Gebrauchsanweisung beachten Leggere le istruzioni per l'uso	Hersteller Fabbriante	Chargen-Bez. Numero di lotto	Verwendbar bis Scadenza	25°C Temperaturbegrenzung Limiti di temperatura 5°C
STERILE A Sterile-Aseptische Technik Sterile-Tecnica asettica	Nicht wiederverwenden Non riutilizzare	Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist Non utilizzare se la confezione è danneggiata		

CE 0123 STERILE A

AMO Ireland  
Block B, Liffey Valley Office Campus  
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland  
blink is a trademark of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.  
© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2018

# blink® intensive

gouttes ophtalmiques lubrifiantes  
verzachtende oogdruppels  
20 x 0.4ml

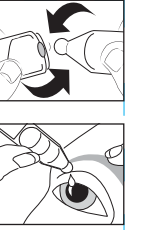

## FR Soulagent durablement de la sensation de fatigue et de sécheresse oculaires

Gouttes ophtalmiques lubrifiantes spécialement formulées pour soulager et apporter un confort aux yeux secs ou irrités.

### Indications

Sensation d'inconfort, yeux irrités. Peuvent être utilisées avec les lentilles de contact.

### Contre-indications

Aucune contre-indication n'est connue.

### Mode d'emploi

- Placer 1 ou 2 gouttes dans l'œil, selon les besoins
- Cligner plusieurs fois pour laver l'œil
- Utiliser aussi souvent que nécessaire
- Si vous portez des lentilles de contact, il n'est pas nécessaire de les enlever

### Précautions

- Toujours utiliser une dosette neuve
- Ne pas utiliser si la dosette est endommagée
- Ne pas avaler la solution
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants
- Pour éviter tout risque de contamination, se garder de tout contact avec l'embout de l'unidose et éviter le contact avec les yeux
- Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation
- Garder hors de la portée des enfants
- À conserver entre 5 °C et 25 °C
- Jeter la dosette et toute solution restante immédiatement après usage
- Les risques, effets indésirables ou complications éventuellement associés aux gouttes ophtalmiques sont : réaction allergique, réaction inflammatoire ou infections

Si les problèmes persistent, veuillez consulter votre spécialiste.

### Effets indésirables

Aucun effet indésirable n'est connu.

### Composition :

Polyéthylène glycol 400 (PEG 400) – 0,25 %  
Hyaluronate de sodium – 0,20 %  
Acide bórico  
Borate de sodium (decahydrate)  
Chlorure de sodium  
Chlorure de potassium  
Chlorure de calcium (dihydrate)  
Chlorure de magnésium  
Eau purifiée

## NL Langdurige verlichting van het gevoel van droge, vermoeide ogen

Een geavanceerde, bevochtigende oogdruppel speciaal voor het verzachten van droge, geïrriteerde of pijnlijke ogen.

### Indicaties

Geïrriteerde, oncomfortabel voelende ogen. Mag in combinatie met contactlenzen gebruikt worden.

### Contra-indicaties

Geen bekende contra-indicaties.

### Gebruiksaanwijzing

- Naar behoefte 1 à 2 druppels in het oog doen
- Een paar keer knipperen om het oog te spoelen
- Zo vaak als nodig gebruiken
- Als u contactlenzen draagt, hoeft u ze niet uit te nemen

### Voorzorgsmaatregelen

- Altijd verse vloeistof gebruiken
- Niet gebruiken als de houder van de eenheidsdosis beschadigd is
- De vloeistof niet inslikken
- Niet gebruiken bij een allergie voor een van de bestanddelen
- Om contaminatie te voorkomen mag de tip van de houder geen enkel oppervlak of het oog rechtstreeks aanraken
- Niet na de uiterste gebruiksdatum gebruiken
- Buiten bereik van kinderen houden
- Bewaren tussen 5-25 °C
- De houder en de resterende oplossing onmiddellijk na gebruik weggooien
- Mogelijke risico's, bijwerkingen of complicaties die over het algemeen gepaard gaan met oogdruppels zijn: allergische reactie, ontstekingsreactie of infecties

Als u problemen blijft hebben, bespreek die dan met uw oogarts.

### Bijwerkingen

Geen bekende bijwerkingen.

### Bevat:

Polyethylenglycol 400 (PEG 400) – 0,25 %  
Natriumhyaluronaat – 0,20 %  
Boorzuur  
Natriumboraat (decahydraat)  
Natriumchloride  
Kaliumchloride  
Calciumchloride (dihydraat)  
Magnesiumchloride  
Gezuiverd water

## Symboles • Symbolen

Consulter le mode d'emploi Raadpleeg de gebruiksaanwijzing	Fabricant Fabrikant	Numéro de lot Lotnummer	Date limite d'utilisation Uiterste gebruiksdatum	25°C Limites de température Temperatuurbeperking 5°C
STERILE A Stérile-Teknik aseptique Steriel. Aseptische techniek	Ne pas réutiliser Niet opnieuw gebruiken	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is		

AM70507GM12D  
Revision Date: 05/2018