

	BLEU BANQUISE 	
	Folder n° : 214030	
PRODUCT NAME	COMPEED CORN MOIST 6	
HRA CODE	COC2OYZ199	
NEW ITEM CODE	55710867	
OLD ITEM CODE	55709929	
TYPE	INSERT CARD	
PHARMA. FORM	PLASTER	
ZONE	-	
COUNTRY	DE / AU / CH	
LANGUAGE	German French Italian	
MANUFACTURER	COLOPLAST	
FORMAT	80 x 153 mm	
TECH. LAYOUT REF.	600192G3	
PRINTED COLOURS	YELLOW	
	BLACK	
	PANTONE 320 C	
		
TECHNICAL COLOURS	DIELINE	
	TECHNICAL PLAN	
	GLOSS VARNISH	
	MATT VARNISH	
FONT	PF DIN text Pro	
MIN. FONT SIZE	4.5 pt	
MAIN TEXT	5.5 pt - 4.5 pt	
MAX. FONT SIZE	15 pt	
SOFTWARE	Illustrator CC	
BAR CODES	EAN	3574660696370
	Laetus	-
DATE (day/month/year)	16/12/2021	
VERSION	1	

FEUCHTIGKEITSSPENDEND / HYDRATANT



Spendet gezielt und anhaltend Feuchtigkeit.
Entwickelt um die Vorbeugung gegen
Hühneraugen zu unterstützen.



MEDIUM
MOYEN

HÜHNERAUGEN
PFLASTER

PANSEMENTS
CORS



Extra
Feuchtigkeitsdepot
Avec
substance
hydratante
con sostanze
idratanti



Sofortige
Schmerzlinderung
soulage
instantanément
la douleur
sollevio
immediato
da dolore

ANWENDUNG:

- Die Haut vor der Anwendung säubern und trocknen. Um eine optimale Haftung zu gewährleisten, muss die Hautstelle rund um das Hühnerauge frei von Creme- und Fettrückständen sein.
- Zuerst das obere dann das untere Schutzpapier entfernen, ohne die Klebefläche zu berühren.
- Das Pflaster mit dem integrierten Feuchtigkeitsdepot direkt auf das Hühnerauge kleben und die Ränder sorgfältig glatt streichen.
- Pflaster erst entfernen, wenn es beginnt sich von selbst zu lösen (Bitte beachten: Pflaster kann problemlos mehrere Tage haften bleiben).
- Für beste Ergebnisse, COMPEED® Hühneraugenpflaster verwenden, bis die Haut weich und geheilt ist. Wenn nötig, COMPEED® Pflaster als Schutz verwenden, um der Entstehung von Hornhaut, welche zu Hühneraugen führt, vorzubeugen.

WARNUNGEN:

- Bei Diabetes vor der Benutzung mit dem Arzt Rücksprache halten.
- Nicht bei infizierten Wunden anwenden.
- Benutztes Pflaster nicht wiederverwenden, um Infektionen zu vermeiden.
- COMPEED® Pflaster niemals zurechtschneiden.
- Eventuelle Kleberückstände auf Textilien können leicht mit Waschbenzin entfernt werden. Anweisungen des Textilherstellers beachten.




Haftet
sicher
Reste en
place
Tenuta
sicura




6
Pflaster
Pansements
Ceroti

FRONT SIDE Gloss Varnish

BACK SIDE Matt Varnish

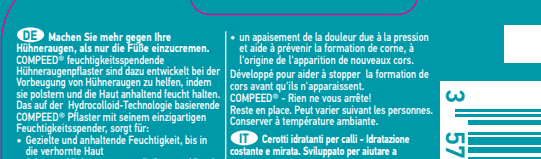

un apaisement de la douleur due à la pression et aide à prévenir la formation de corne, à l'origine de l'apparition de nouveaux cors.
Développé pour aider à stopper la formation de cors avant qu'ils n'apparaissent.
COMPEED® - Rien ne vous arrête!
Reste en place. Peut varier suivant les personnes. Conserver à température ambiante.

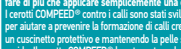

COMPEED® Cerotti idratanti per calli - Idratazione costante e mirata. Sviluppo per aiutare a prevenire la formazione di calli. Contro i calli si può fare di più che applicare semplicemente una crema. I cerotti COMPEED® contro i calli sono stati sviluppati per aiutare a prevenire la formazione di calli creando un cuscinetto protettivo e mantenendo la pelle sempre umida. Il cerotto COMPEED® basato su tecnologia idrocolloidale con eccezionale strato interno idratante:

- crea un'umidità costante e mirata fin nello strato corneo.
- forma un cuscinetto protettivo contro la frizione e la pressione.
- allevia il dolore sui punti di pressione e aiuta a prevenire l'indurimento della cute che provoca la formazione di nuovi calli.

Concepito per arrestare i calli prima che si formino. COMPEED®, niente più fermati! Tenuta sicura. Sono possibili variazioni individuali. Conservare a temperatura ambiente.



0459



COMPEED® - Nichts kann dich stoppen!
COMPEED® - Rien ne vous arrête! /Niente può fermarti!
INGREDIENTS: CELLULOSE GUM, STYRENE-ISOPRENE COPOLYMER, PETROLEUM JELLY, HYDRO-CARBON RESIN, DIOCTYL ADPATE, TITANIUM DIOXIDE, POLYURETHANE F.L.M.



6 x
1,7 x 5,7 cm



AVVERTENZE:

- In caso di diabete consultare il medico prima dell'uso.
- Non applicare su ferite infette.
- Per prevenire infezioni, non riutilizzare i cerotti usati.
- Non tagliare mai un cerotto COMPEED®.
- Eventuali residui di adesivo si eliminano facilmente con acqua ragia attenendosi alle istruzioni del produttore del tessuto.



HRA Pharma Switzerland
22 rue Juste Olivier
1260 Nyon - Switzerland



CH REP
CH IMP



www.compeed.com



REF
COC2OY



55710867
Rev. Date:
12/2021