


# blink contacts®

beruhigende Augentropfen  
gouttes de confort

TOP FRONT

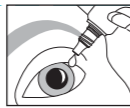

10ml

## DE Errfrischung für Kontaktlinsenträger mit trockenen, müden Augen

Diese speziell für Kontaktlinsenträger formulierten Augentropfen sind sanft, äußerst wirksam, beruhigend und erfrischend für trockene, müde Augen. Geeignet für alle Kontaktlinsen – die Kontaktlinsen müssen vorher nicht abgesetzt werden.

### Gebrauchsanleitung

- Nach Bedarf 1 oder 2 Tropfen in das betroffene Auge träufeln
- Mehrmals blinzeln, um Auge zu spülen
- Können so oft wie nötig verwendet werden
- Die Kontaktlinsen müssen nicht abgesetzt werden
- Für zusätzlichen Komfort 1 oder 2 Tropfen vor dem Aufsetzen auf jede Kontaktlinse geben

### Zur Verwendung mit allen Arten von Kontaktlinsen.

#### Vorsichtsmaßnahmen

- Nicht verwenden, wenn Sicherheitsversiegelung fehlt oder nicht mehr intakt ist
- Lösung nicht schlucken
- Verwenden Sie die Lösung nicht, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, Tropferspitze nicht mit Oberflächen in Berührung bringen und Kontakt mit den Augen vermeiden
- Nach der Anwendung bitte die Flasche sofort fest verschließen
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Zwischen 5 °C und 25 °C aufbewahren
- Kontaktlinsen nicht mit Leitungswasser spülen
- 45 Tage nach Anbruch der Packung restliche Lösung entsorgen

Wenn Sie weiterhin Probleme haben, sprechen Sie bitte mit Ihrem Augenarzt.

#### Inhalt:

Natriumhyaluronat - 0,15 %  
OcuPure® Konservierungsstoff - 0,005 %  
Calciumchlorid (Dihydrat)  
Kaliumchlorid  
Natriumchlorid  
Boratpuffer  
Magnesiumchlorid  
Gereinigtes Wasser

## FR Soulagent les yeux secs et fatigués des porteurs de lentilles de contact

Conçues spécialement pour les porteurs de lentilles de contact, ces gouttes ophtalmiques apportent un soulagement immédiat et rafraîchissent les yeux secs et fatigués. Elles conviennent à toutes les lentilles de contact ; il est inutile de les retirer avant l'application.

### Mode d'emploi

- Instiller 1 ou 2 gouttes dans l'œil concerné, selon les besoins
- Cligner à plusieurs reprises pour le nettoyer
- Ces gouttes peuvent être utilisées aussi souvent que vous le souhaitez
- Il n'est pas nécessaire de retirer vos lentilles
- Pour plus de confort, instiller 1 ou 2 gouttes sur chaque lentille avant de la poser sur l'œil

### Convient à tous les types de lentilles de contact.

#### Précautions d'emploi

- Ne pas utiliser si la bague d'inviolabilité est endommagée ou absente
- Ne pas avaler la solution
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants
- Pour éviter toute contamination, ne pas mettre l'embout du flacon en contact avec quelque surface que ce soit et éviter le contact avec les yeux
- Bien refermer le flacon immédiatement après utilisation
- Ne pas utiliser après la date de péremption
- Garder hors de portée des enfants
- À conserver entre 5 °C et 25 °C
- Ne pas rincer les lentilles à l'eau du robinet
- Jeter toute solution restante 45 jours après l'ouverture initiale du flacon

Si les problèmes persistent, contactez votre spécialiste.

#### Composition :

Hyaluronate de sodium - 0,15 %  
Conservateur OcuPure® - 0,005 %  
Chlorure de calcium (dihydrate)  
Chlorure de potassium  
Chlorure de sodium  
Tampon borate  
Chlorure de magnésium  
Eau purifiée

## Symboles • Symbole

Gebrauchsanweisung beachten Consulter le mode d'emploi	Hersteller Fabricant	25°C Temperaturbegrenzung Limites de température
STERILE A Steril. Aseptische Technik Stérile. Technique aseptique	LOT Chargen-Bez. Numéro de lot	5°C
Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	Verwendbar bis Date limite d'utilisation	45D 45 Tage nach Anbruch der Packung restliche Lösung entsorgen Jeter toute solution restante 45 jours après l'ouverture initiale du flacon

CE 0123

STERILE A



AMO Ireland  
Block B, Liffey Valley Office Campus  
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland  
blink, blink contacts and OcuPure are trademarks of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.  
© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2018

# blink contacts®

gocce oculari lenitive  
verzachtende oogdruppels

TOP BACK

CODE 128

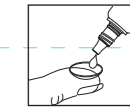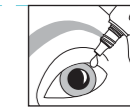

10ml

## IT Sollievo dagli occhi secchi e irritati per i portatori di lenti a contatto

Formulate specificamente per i portatori di lenti a contatto, queste gocce oculari delicate e altamente efficaci combattono gli occhi stanchi, secchi e irritati. Idonee per tutti i tipi di lenti a contatto; non è necessario togliersi le lenti prima di applicare le gocce.

### Istruzioni per l'uso

- 1 o 2 gocce nell'occhio interessato, secondo necessità
- Ammicciare varie volte con le palpebre per pulire l'occhio
- Utilizzabili con la frequenza desiderata
- Non è necessario togliere le lenti a contatto
- Per maggiore comfort, versare 1 o 2 gocce su ciascuna lente prima di inserirla

### Idonee per l'uso con tutti i tipi di lenti a contatto.

#### Precauzioni

- Non utilizzare se il sigillo anti-manomissione è danneggiato o assente
- Non ingerire la soluzione
- Non utilizzare in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti
- Per prevenire la contaminazione evitare il contatto della punta del contenitore con qualsiasi superficie ed evitare il contatto con gli occhi
- Chiudere bene il flacone immediatamente dopo l'uso
- Non utilizzare dopo la data di scadenza
- Mantenere fuori dalla portata dei bambini
- Conservare a temperatura compresa fra 5 °C e 25 °C
- Non sciappare le lenti a contatto con acqua di rubinetto
- Eliminare tutta l'eventuale soluzione rimasta 45 giorni dopo la prima apertura del flacone

In caso di problemi persistenti, rivolgersi all'oculista.

#### Contiene:

l'aluronato di Sodio - 0,15%  
Conservante OcuPure® - 0,005%  
Cloruro di Calcio (Diidrato)  
Cloruro di Potassio  
Cloruro di Sodio  
Tampone Borato  
Cloruro di Magnesio  
Acqua Purificata

## NL Verlichting voor dragers van contactlenzen met droge, vermoeide ogen

Deze oogdruppels zijn speciaal geformuleerd voor dragers van contactlenzen; ze kalmeren en verwikken droge, vermoeide ogen op zachte en effectieve wijze. Geschikt voor alle contactlenzen zonder dat u eerst uw lenzen hoeft te verwijderen.

### Gebruiksaanwijzing

- Druppel naar behoefte 1 of 2 druppels in het betreffende oog
- Knipper een paar keer om het oog te bevochtigen
- Mag zo vaak gebruikt worden als nodig is
- Uw lenzen hoeven niet verwijderd te worden
- Druppel voor extra comfort 1 of 2 druppels op iedere lens voor u ze indooft

### Voor gebruik met alle soorten contactlenzen.

#### Voorzorgsmaatregelen

- Niet gebruiken als de veiligheidsverzegeling verbroken of afwezig is
- De oplossing niet doorslikken
- Niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de bestanddelen
- Om contaminatie te voorkomen, de tip van de fles niet in contact brengen met enig ander oppervlak of met de ogen
- Sluit de fles onmiddellijk na gebruik goed af
- Niet na de uiterste gebruiksdatum gebruiken
- Buiten bereik van kinderen houden
- Bewaren bij 5 °C tot 25 °C
- Uw lenzen niet met kraanwater afspoelen
- Gooi enige resterende oplossing 45 dagen na opening weg

Als uw problemen aanhouden, bespreek deze dan met uw oogspecialist.

#### Bevat:

Natriumhyaluronaat - 0,15%  
OcuPure® conserveermiddel - 0,005%  
Calciumchloride (dihydraat)  
Kaliumchloride  
Natriumchloride  
Boraatbuffer  
Magnesiumchloride  
Gezuiverd water

## Simboli • Symbolen

Leggere le istruzioni per l'uso Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gebruik	Fabbricante Fabrikant	25°C Limiti di temperatura Temperatuurlimiet
STERILE A Sterile. Tecnica asettica Stérile. Aseptische techniek	LOT Lotto Partijnummer	5°C
Non utilizzare se la confezione è danneggiata Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is	Scadenza Niet gebruiken na	45D Eliminare tutta l'eventuale soluzione rimasta 45 giorni dopo la prima apertura del flacone. Gooi enige resterende oplossing 45 dagen na opening weg

AM70488GM13D  
Revision Date: 04/2018

XXXXXX XX