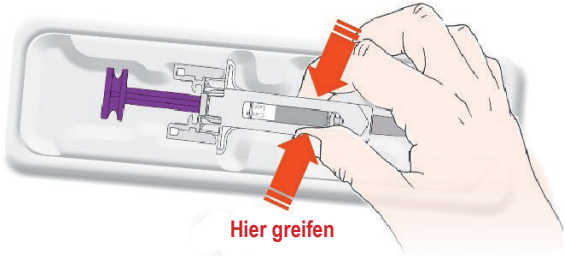
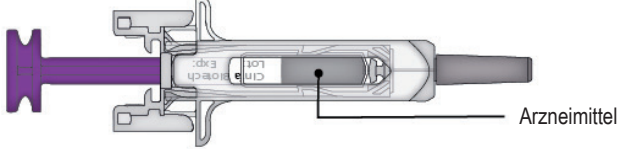
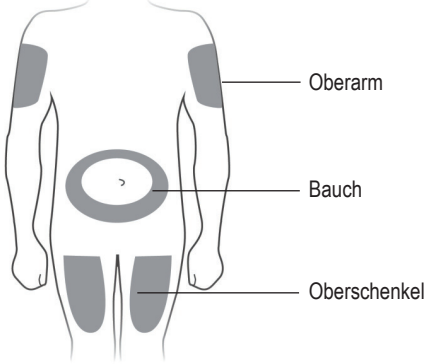


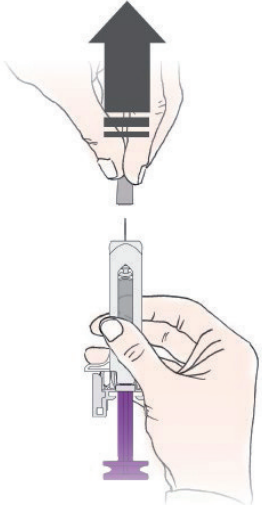
Wichtig	
Lesen Sie diese wichtige Information, bevor Sie eine Cegfila Fertigspritze mit automatischem Nadelschutz anwenden:	
• Es ist wichtig, dass Sie nicht versuchen, sich selbst die Injektion zu geben, es sei denn, Sie wurden von Ihrem Arzt oder dem medizinischen Fachpersonal darin geschult. • Cegfila wird als Injektion in das Gewebe direkt unter der Haut angewendet (subkutane Injektion).	
✗ Entfernen Sie die Nadelschutzkappe nicht von der Fertigspritze, bevor Sie für die Injektion bereit sind.	
✗ Wenden Sie die Fertigspritze nicht an, wenn sie auf eine harte Oberfläche gefallen ist. Verwenden Sie eine neue Fertigspritze und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder das medizinische Fachpersonal.	
✗ Versuchen Sie nicht , die Fertigspritze vor der Injektion zu aktivieren.	
✗ Versuchen Sie nicht , den durchsichtigen Nadelschutz der Fertigspritze von der Fertigspritze zu entfernen.	
✗ Versuchen Sie nicht , das abziehbare Etikett auf dem Zylinder der Fertigspritze abzulösen, bevor Sie Ihre Injektion anwenden.	
Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder das medizinische Fachpersonal, falls Sie Fragen haben.	

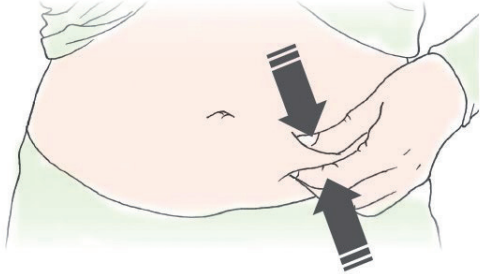
Schritt 1: Vorbereitung	
A	Entnehmen Sie der Packung den Einsatz mit der Fertigspritze und stellen Sie die Gegenstände zusammen, die Sie für Ihre Injektion benötigen: Alkoholtupfer, Wattebausch oder Verbandmull, Pflaster und einen durchstichsicheren Behälter (nicht enthalten) bereit.
Für eine angenehmere Injektion belassen Sie die Fertigspritze vor der Injektion für etwa 30 Minuten bei Raumtemperatur. Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife. Legen Sie die neue Fertigspritze und die anderen Gegenstände auf eine saubere, gut beleuchtete Arbeitsfläche.	
✗ Versuchen Sie nicht , die Spritze mit einer Wärmequelle wie heißem Wasser oder einer Mikrowelle zu erwärmen.	
✗ Setzen Sie die Fertigspritze nicht direktem Sonnenlicht aus.	
✗ Schütteln Sie die Fertigspritze nicht .	
✗ Bewahren Sie die Fertigspritzen für Kinder unzugänglich auf.	

B	Öffnen Sie den Einsatz, indem Sie die Abdeckung abziehen. Greifen Sie den Nadelschutz der Fertigspritze, um die Fertigspritze aus dem Einsatz zu entnehmen.
	
Aus Sicherheitsgründen:	
✗ Nicht am Kolben greifen.	
✗ Nicht an der Nadelschutzkappe greifen.	

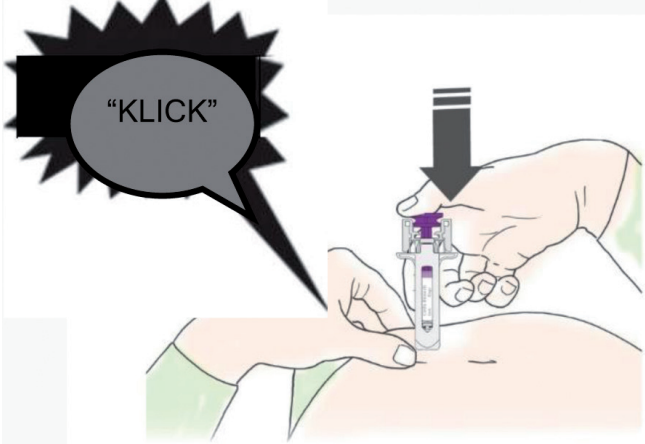
C	Kontrollieren Sie das Arzneimittel und die Fertigspritze.
	
✗ Wenden Sie die Fertigspritze nicht an, wenn: • Das Arzneimittel trübe ist oder Partikel darin enthalten sind. Es muss eine klare und farblose Flüssigkeit sein. • Irgendein Teil gesprungen oder gebrochen erscheint. • Die Nadelschutzkappe fehlt oder nicht fest angebracht ist. • Der letzte Tag des angegebenen Monats des Verfalldatums, welches auf dem Etikett aufgedruckt ist, überschritten ist.	
In allen diesen Fällen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder an das medizinische Fachpersonal.	

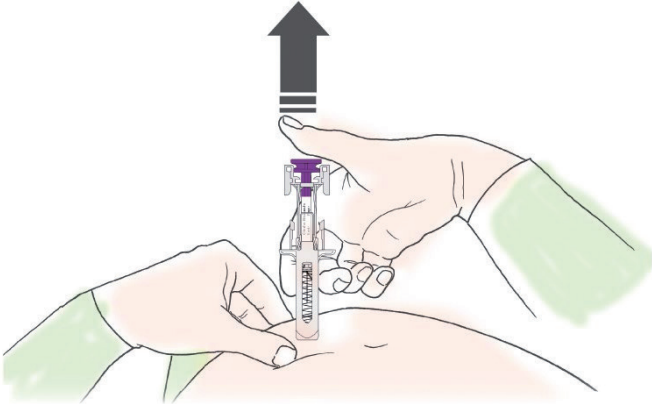
Schritt 2: Machen Sie sich bereit	
A	Waschen Sie sich gründlich Ihre Hände. Bereiten Sie Ihre Injektionsstelle vor und reinigen Sie sie.
	
Sie können verwenden:	
• Die Vorderseite Ihres Oberschenkels. • Den Bauch, mit Ausnahme eines 5 cm-Bereiches um Ihren Bauchnabel herum. • Die Rückseite des Oberarms (nur, wenn eine andere Person Ihnen die Injektion gibt).	
Reinigen Sie die Injektionsstelle mit einem Alkoholtupfer. Lassen Sie Ihre Haut trocknen.	
✗ Berühren Sie die Injektionsstelle nicht mehr vor der Injektion.	
! Injizieren Sie nicht in Bereiche, in denen die Haut empfindlich, verletzt, gerötet oder verhärtet ist. Vermeiden Sie, in Bereiche mit Narben oder Dehnungsstreifen zu injizieren.	

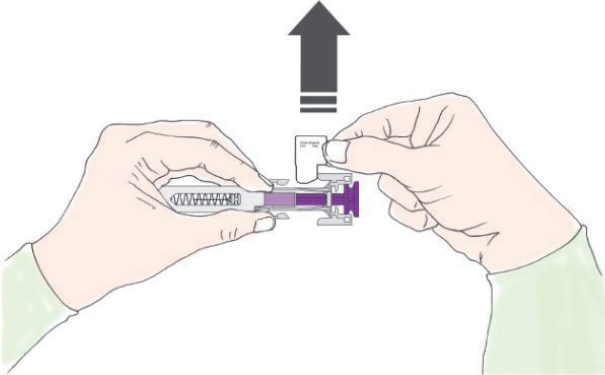
B	Ziehen Sie vorsichtig die Nadelschutzkappe gerade und weg von Ihrem Körper ab.
	

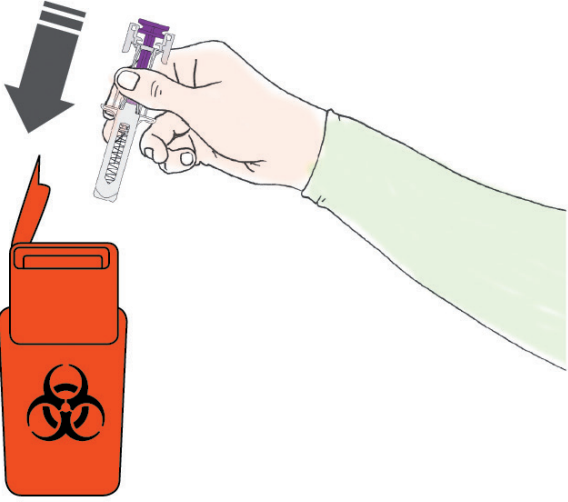
C	Drücken Sie Ihre Injektionsstelle zusammen, um eine feste Oberfläche zu erzeugen.
	
! Es ist wichtig, die Haut während der Injektion zusammengedrückt zu halten.	

Schritt 3: Injektion	
A	Die Haut zusammengedrückt halten. STECHEN Sie die Nadel in die Haut.
	
✗ Berühren Sie nicht den gereinigten Bereich der Haut.	
B	DRÜCKEN Sie den Kolben langsam und mit gleichmäßigem Druck, bis Sie ein "Klick" spüren oder hören. Drücken Sie nach dem Klick vollständig durch.

	
! Es ist wichtig, nach dem "Klick" vollständig durchzudrücken, um Ihre gesamte Dosis abzugeben.	

C	Daumen LOSLASSEN. Anschließend HEBEN Sie die Spritze von der Haut ab.
	
Nach dem Loslassen des Kolbens wird die Injektionsnadel sicher vom Nadelschutz der Fertigspritze umschlossen.	
✗ Setzen Sie die Nadelschutzkappe nicht mehr auf gebrauchte Fertigspritzen auf.	

Nur für medizinisches Fachpersonal	
Der Handelsname und die Chargenbezeichnung des angewendeten Produktes sollten eindeutig in der Patientenakte dokumentiert werden.	
Entfernen Sie das Etikett der Fertigspritze und heben Sie es auf.	
	
Drehen Sie den Kolben, um das Etikett in eine Position zu bringen, in der Sie das Etikett der Spritze entfernen können.	

Schritt 4: Abschluss	
A	Entsorgen Sie die gebrauchte Fertigspritze und andere Materialien in einem durchstichsicheren Behälter.
	
Arzneimittel sind entsprechend den nationalen Anforderungen zu beseitigen. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie Arzneimittel zu entsorgen sind, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Bewahren Sie die Spritze und den durchstichsicheren Behälter für Kinder unzugänglich auf.	
✗ Die Fertigspritze nicht erneut verwenden.	
✗ Die Fertigspritzen nicht der Wiederverwendung zuführen und nicht in den Haushaltsabfall werfen.	
B	Kontrollieren Sie die Injektionsstelle.
Falls Sie Blut bemerken, drücken Sie einen Wattebausch oder Verbandmull auf Ihre Injektionsstelle. Reiben Sie die Injektionsstelle nicht . Falls erforderlich, verwenden Sie ein Pflaster.	